



Lève-personne mobile

VertiHelp / VertiHelp UNI / VertiHelp UNI eFlow

VertiHelp est un appareil mobile compact, idéal pour les personnes qui ont des difficultés à marcher mais qui peuvent s'asseoir et se lever avec un soutien. Il est utilisé pour transférer l'utilisateur entre différentes positions assises, par exemple pour l'aider à s'asseoir ou à se lever d'un fauteuil, d'une chaise, d'un fauteuil roulant, d'un lit ou de toilettes.

Cet appareil facilite les déplacements lors des changements de vêtements, des soins d'hygiène et d'autres activités de soins.

Idéal pour une utilisation quotidienne dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les sanatoriums et les établissements de soins à domicile, son faible rayon de braquage le rend adapté même aux espaces confinés. En tant qu'appareil non motorisé, VertiHelp simplifie les transferts quotidiens avec aisance.

La pédale permet de régler facilement l'écartement des pieds de la base. Associé au repose-pieds bas, il permet d'accéder facilement aux fauteuils roulants, aux lits, etc.

Caractéristiques de VertiHelp / VertiHelp Uni / VertiHelp UNI eFlow :



2 grandes poignées

Pour le personnel (assistant) afin de manœuvrer l'appareil, et une poignée pour l'utilisateur final de se tenir lorsqu'il entre dans l'ascenseur ou pendant le transfert.



Genouillère réglable

Elle permet de soutenir le patient pour le mettre en position semi-debout et soutient les jambes pendant le transfert.



Roulettes arrière avec frein

Empêchent tout mouvement involontaire, par exemple lorsque l'utilisateur final est assis.



Crochet (en option)

Des deux côtés - pour fixer la ceinture de sécurité du patient (avec clips).



Pièces du siège

Pivotez latéralement pour faciliter la mise en place de l'utilisateur final.



Pour en savoir plus :
www.meden.link/VertiHelp-vEN

Lève-personne mobile

VertiHelp / VertiHelp UNI / VertiHelp UNI eFlow



VertiHelp



Charge maximale d'utilisation (CMU)

Caractéristiques principales de VertiHelp :



Pédale

Permet de régler facilement l'écartement des pieds de la base. Associé au repose-pieds bas, il permet d'accéder sans effort aux fauteuils roulants, aux lits, etc.



Écartement des pieds de la base
De 50 à 91 cm pour s'adapter à divers environnements.



Disponible et prêt à l'emploi
Entièrement assemblé à la sortie de l'emballage
- aucune installation requise.

VertiHelp UNI




Charge maximale d'utilisation (CMU)

Caractéristiques principales du VertiHelp UNI :



Dimensions de transport réduites

Livré partiellement démonté (partie supérieure et repose-pieds séparées) dans un petit carton pour un transport peu encombrant.

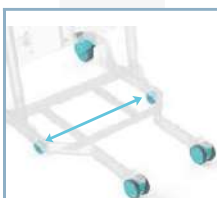

Roues supplémentaires

Deux roues supplémentaires améliorent la stabilité globale de l'appareil et du patient.



Partie rétrécie des pieds de la base

La distance réduite entre les pieds facilite l'accès aux sièges dans les espaces restreints.

VertiHelp

UNI eFlow



Charge maximale d'utilisation (CMU)



Le système d'assistance eFlow (système d'entraînement)



Module d'entraînement eFlow
Module d'entraînement avec roue motorisée.

Caractéristiques principales du VertiHelp UNI eFlow :




Commande manuelle

Direction électrique de la roue motorisée (avant/arrière).

Support magnétique pour la commande manuelle

Permet de fixer la commande manuelle à la poignée, ce qui vous permet d'utiliser le système eFlow sans retirer vos mains, tout en conservant un contrôle total de la direction et de la vitesse.

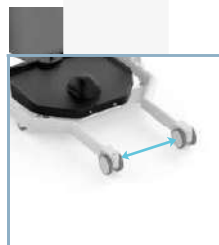

Partie rétrécie des pieds de la base

La distance réduite entre les pieds simplifie l'accès aux sièges avec des espaces restreints.



Roues supplémentaires

Quatre roues supplémentaires améliorent la stabilité de l'appareil et du patient.



Dimensions de transport compactes

Livré partiellement démonté (partie supérieure et repose-pieds séparés) dans un petit carton afin de réduire le volume de transport.

Accessoires supplémentaires :

Ceinture :



standard



avec support supplémentaire

Deux types de ceintures de stabilisation disponibles : une version standard et une version avec support supplémentaire. Les deux se fixent à des broches latérales.

Disponibles en deux tailles : S/M ou L/XL.

