



PolyMoove

by ABC



Particules polypropylène

Le positionnement enfin spécifiquement étudié et adapté pour les professionnels de la santé

Avec la gamme PolyMoove :

■ Fini les positionneurs qui ne durent pas ...

Les PolyMoove sont garantis 2 ans, et les particules de polypropylène ne se tassent pas

■ Fini les positionneurs nauséabonds de transpiration, d'urine et autres matières ...

PolyMoove n'a pas de housse amovible, il se nettoie par essuyage humide et en cas de besoin ... passe en machine à 95° et au sèche-linge

■ Fini les housses qui se détériorent ...

Notre tissu Obatex Bravo est celui que nous utilisons sur nos matelas hospitaliers depuis 1991 sans aucun problème qualitatif

■ Fini les positionneurs que l'on repositionne toutes les demi-heures ...

La forme en osselet des PolyMoove maintient la position choisie bien en place, aucun fluage

■ Fini les positionneurs sans tenue de forme ...

Avec les PolyMoove, le coussin garde toujours une épaisseur significative, et une cale à 30° permet vraiment d'obtenir 30°



✓ Unique : passent en machine à laver et au sèche-linge !

les PolyMoove peuvent se laver en machine à 95°C et passent au sèche-linge en cycle doux.



✓ Agréable : la limitation du bruit pour des patients au sommeil plus serein

la souplesse du produit permet à nos positionneurs de faire le moins de bruit possible lors des mouvements, pour ne pas gêner le sommeil des patients.


✓ Efficace : une bonne répartition de la pression

les particules en forme d'osselets s'emboîtent parfaitement pour un moulage parfait du corps. Le polypropylène est souple ce qui permet d'obtenir une basse pression sur les zones d'appui.



✓ Durable : réalisation en particules de Polypropylène

Des produits différents et plus efficaces que ceux en billes de polystyrène, mixtes, viscoélastiques, fibres longues.

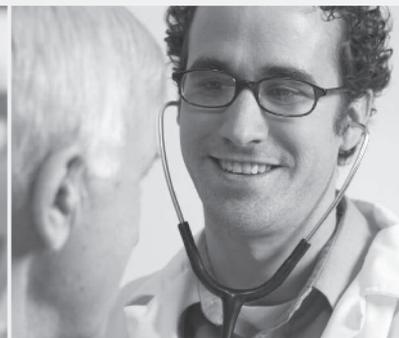

ABC

ANNIE BAUER CONFORT

Bât. l'Antonia - 4 La Petite Bermone
06270 VILLENEUVE Loubet - France

Tél. 04 93 22 94 75
Fax 04 92 02 13 05

contact@anniebauerconfort.com
www.anniebauerconfort.com



PolyMoove

by ABC



Cale de décubitus latéral à 30° préformée - POL95

Cette cale permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Lors d'une mise en décubitus latéral, il protégera efficacement contre les sur-pressions et évitera les problèmes d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets. Utilisé conjointement avec un coussin, elle répond à la protection du patient dans toutes les positions latérales.
Dimensions : 175 x 36 cm

La meilleure gamme de positionneurs, grâce à ses qualités uniques.

Nos positionneurs PolyMoove sont réalisés en particules osselets de polypropylène. Nous avons fait le choix de ce matériau pour ses qualités uniques qui rendent nos produits différents et efficaces :

■ **Résistance au lavage** : tous nos produits PolyMoove se lavent en machine à 95°C et passent au sèche-linge en cycle doux.

■ **Répartition de la pression** : les particules en forme d'osselets s'emboîtent parfaitement pour un moulage parfait du corps. Le polypropylène est souple (à la différence du polystyrène) ce qui permet d'obtenir une basse pression sur les zones d'appui.

■ **Limitation du bruit** : la grande souplesse du produit permet à nos positionneurs de faire très peu de bruit lors des mouvements, ce qui est nécessaire pour ne pas gêner le sommeil des patients.



Coussins multi-usages rectangulaires - POL30 & POL32

Comme tous les accessoires PolyMoove, ces coussins sont multi-usages : oreiller, maintien de l'abdomen lors d'une mise en décubitus latéral, protection des jambes et/ou des genoux, appui-talons ou mollets, ...
POL30 : 31 x 41 cm / POL32 : 41 x 60 cm



GARANTIE

TISSUS



Petits coussins multi-usages

POL10, POL11 & POL12

Ces petits coussins multi-usages sont adaptés pour une utilisation rapide, au besoin pour prévenir un point de pression à risque pour : la tête, maintien de l'abdomen, protection des jambes et/ou des genoux, appui-talons, mollets, ...

POL 10 : 15 x 40 cm

POL11 : 22 x 22 cm

POL12 : 22 x 30 cm



Coussin fer à cheval

POL20



Ce coussin offre une alternative à l'utilisation d'oreiller ergonomique pour la protection de la tête du patient alité. Il peut également répondre à un besoin au niveau de l'assise comme coussin bouée.
Dimensions : 90 x 18 cm



Tous les produits PolyMoove sont lavables directement en machine, et passent au sèche-linge !



Cylindre de protection - POL40

Demi-rond d'abduction pour cylindre - POL70



La forme arrondie le destine à une utilisation sous des zones fragiles : mise en décharge des talons, support des genoux, ... mais il apporte aussi des solutions pour des zones d'appui longues et étroites : support de bras, protection des jambes, ... La mise en place du demi-rond POL70 permet de protéger les genoux en abduction.

POL40 : ø 18 x 70 cm / POL70 : adaptable sur cylindre ø 18 cm



Coussin demi-lune / coussin d'allaitement
POL50 / POL50F (finition tissu coton gratté)

Ce coussin sert à maintenir agréablement le dos en place lors d'une position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise. Il peut être livré en finition agréable tissu coton first, pour utilisation comme coussin d'allaitement.

Dimensions : 172 x 36 cm



Cale de maintien triangulaire pour patient allité - POL35

Cette cale de maintien est utilisée pour offrir une position adaptée aux patients allités. Elle permet un parfait maintien en mettant le dos dans une position confortable. Peut également être utilisée pour un positionnement semi-latéral, ou avec le dossier du lit redressé.

Dimensions : 60 x 40 cm



Coussin semi-fowler cylindrique en T

Notre coussin maintient et cale confortablement les patients allités en position semi-Fowler. Ce coussin se place sous les cuisses du patient avec le plot d'abduction cylindrique entre les genoux. Comme pour nos autres produits, pour parfaire le positionnement on peut utiliser un support pour les talons ou les bras.

POL112 - Dimensions : 60 x 25 ø 25 cm



Coussins triangulaires de décharge - POL36 / POL37

Ces coussins permettent de mettre le coude ou le talon en décharge avec une position confortable. Leurs hauteurs sont adaptées pour obtenir le meilleur soulagement possible de la pression d'appui au niveau du coude et du bras ou de la jambe.

POL 36 : 20 x 41 cm - Hauteur de 1 à 9 cm

POL 37 : 21 x 42 cm - Hauteur de 2 à 14 cm



Cale d'abduction - POL75

La mise en place de cette cale permet de protéger les genoux pour convenir à un grand nombre de besoins de positionnement du patient allité.

Dimensions : 20 x 30 x 5

Hauteur 14 cm



Coussin polyvalent multi-usages - POL38

Formé par 4 boyaux remplis d'osselets, ce coussin peut être plié, mis en rouleau pour convenir à un grand nombre de besoins de positionnement du patient allité. Décharge des talons, soutien du creux poplité, protection de la tête avec soutien de la nuque ... une vraie polyvalence.

Dimensions : 60 x 60 cm avec 4 boudins



Ensemble de positionnement pour bras comprend le support et le coussin

Cet ensemble de 2 coussins permet de caler parfaitement le bras des patients hémiplégiques au fauteuil. Les 2 coussins s'assemblent grâce au velcro présent sur les 2 faces.


POL52 - Ensemble de positionnement pour bras

Coussin : 35 x 43 cm avec arrondi - Rouleau 43 cm ø 14 cm





Protection talon
POL 98 : 46 x 8/3 cm

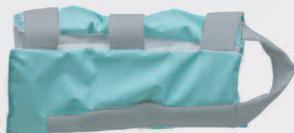

Protection talon
POL 93 : 33 x 8/4 cm

Les protections pour talons Polymoove

■ Une solution intelligente

La protection pour talon Polymoove peut-être utilisée pour des patients très agités, sans que celle-ci ne se déplace. La protection a été fabriquée de telle sorte qu'elle ne serrera pas le talon.

■ Utilisation variée

Cette protection s'utilise également pour des patients paralysés d'un côté car elle maintient le pied parfaitement en place.

■ Anatomique

La forme anatomique de la protection Polymoove permet un dégagement parfait du talon, même lors d'un appui incliné de la jambe.

■ Agréable

La protection Polymoove assure un moulage confortable du mollet pour un appui agréable sans la moindre pression.



Même avec la jambe inclinée, le talon est toujours en décharge.



Cale de décharge des talons au lit - POL62

Ideal pour mettre les deux talons en décharge totale. Il se fixe sur le matelas à l'aide d'une sangle réglable en longueur avec une attache rapide. En plus d'offrir une décharge totale des talons, cette cale permet de stabiliser les chevilles des patients.



Protections talons - POL60 (par paire)

Paire de protection talon en microfibrilles siliconées enduites.

Le complément idéal de nos autres produits Polymoove. Elles donnent une grande sensation de confort et assurent une très bonne prévention des escarres.

Coussins de protection pour bras

Réalisation identique à nos protections talons, ces supports permettent de protéger facilement le bras ou le mollet des patients. Avec ses fixations velcro, la protection reste parfaitement en place même pour des patients agités. 4 modèles
POL130S - taille S : 30 cm ø 7 à 10 cm
POL130M - taille M : 40 cm ø 8,5 à 14 cm
POL130L - taille L : 50 cm ø 10 à 18 cm
POL130XL - taille XL : 60 cm ø 13 à 22 cm



Votre distributeur :

Housse - Entretien

Réalisée en Obatex Bravo, cousue, elle aide à la régulation de température et d'humidité, perméable à l'air, imperméable aux liquides.

Nettoyage et désinfection

- . nettoyage à sec
- . lavage à 95 °C
- . désinfection par produits usuels (voir certificat ANIOS)
- . en cas de besoin le positionneur peut passer en machine et au sèche-linge (cycle doux)

Ne pas utiliser de produits à base de solvants (cétone, THF, diméthylformamide,...), des acides concentrés ou des phénols.

Garantie : deux ans contre tous vices de fabrication, pour une utilisation dans les conditions normales; tous accrocs ou déchirures de la housse ne sont pas couverts par la garantie.

Numéro d'enregistrement : 29423ter
Numéro d'étude : 13/02SPA

LABORATOIRES ANIOS

LABORATOIRE DE PRESTATIONS ASSOCIEES

Responsables :
G. RAUWEL
M. SAUTY

Etude réalisée par :
V. PERROTTE

ETUDE DE COMPATIBILITE
Vérification de la compatibilité de produits de nettoyage et désinfection vis-à-vis d'une housse de matelas.

CLIENT : Société ABC

Résultats :

OBSERVATION des échantillons :

Après la réalisation de 50 cycles d'application et après une semaine de séchage à l'air ambiant, aucune modification de la housse de matelas n'a été observée avec les produits ANIOS OXYFLOOR et ANIOXYSRAY WS.

Conclusion :

Les produits ANIOS OXYFLOOR et ANIOXYSRAY WS utilisés conformément aux recommandations des Laboratoires ANIOS, sont compatibles avec la housse de matelas OBATEX M1 provenant de la société ABC pour 50 cycles de nettoyage et désinfection.

Sainthin-en-Ménilantais, le 04 mars 2013

Mathieu SAUTY
Responsable Chimie Analytique
Enregistrement n°29423ter - Etude n°13/02SPA

Gaelien RAUWEL
Responsable Recherche et Développement
Le 04/03/13